



DAKEWE

SurePrint C100

Impresora láser
inteligente de cassettes

Fluido, de alto rendimiento,
compacto y flexible



**Sistemas
Analíticos**

SurePrint C100

Impresora láser inteligente de cassettes

Gracias a la innovadora tecnología de marcado láser sin contacto, la SurePrint C100 ofrece una alta velocidad de impresión y una solución económica.

Su funcionamiento es sencillo y fácil de usar, con alta fiabilidad y estabilidad. Gracias a sus cassettes universales, los caracteres impresos son nítidos y resistentes a los arañazos, y no se decoloran ni se desprenden tras su uso en todas las etapas del procesamiento de muestras.

Características



Sistema inteligente de identificación de colores RGB

La impresora incorpora un sensor de identificación de color RGB PATENTADO que detecta automáticamente el color de cada cassette.



Software inteligente

El software incorporado tiene capacidad de conexión a sistema LIS/HIS/PIS/PACS. Además, permite editar la plantilla de impresión según los requisitos del usuario. Cuenta con modo de impresión por lote y de cassettes individuales a pedido.




Seguridad y salud ambiental

El sistema de purificación de aire incorporado puede filtrar eficazmente el polvo generado después de la impresión para proteger la salud humana y la seguridad ambiental.

Impresora láser inteligente de cassettes

SurePrint C100

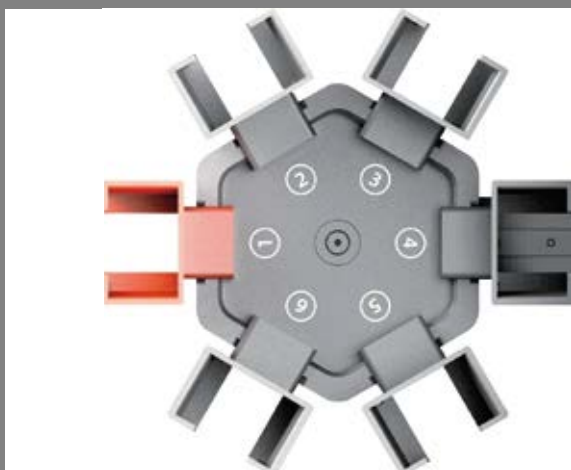

Alta eficiencia, alto rendimiento y estabilidad

El dispositivo está equipado con 6 canales metálicos con capacidad para entre 450 y 600 cassettes. La velocidad de impresión máxima continua es de hasta 2,5 segundos por cassette (dependiendo del contenido de la impresión) y la estación de salida admite hasta 100 cassettes simultáneamente. La SurePrint C100 admite todos los volúmenes de trabajo de laboratorio.

Impresión nítida y gran compatibilidad

La SurePrint C100 ofrece una alta resolución de impresión y permite imprimir diversas fuentes, tamaños de fuente, símbolos especiales de diversos textos, además de códigos QR y códigos de barras. El dispositivo puede imprimir cassettes sin tapa, cassettes unidos con tapa y cassettes con tapa dividida. Es compatible con cassettes con ángulos de 35° y 45°.



Diseño inteligente e intuitivo

La gran pantalla LED de la SurePrint C100 permite conectarla al sistema de software o imprimir sin necesidad de un sistema externo. Las funciones de activación por voz inteligente y reconocimiento de voz interactivo facilitan el uso al personal del laboratorio. La impresión multicolor es posible gracias a que la impresora láser reconoce inteligentemente el color de los cassettes e imprime el de la categoría correspondiente.



Especificaciones

C100

Tecnología de impresión	Tecnología de marcado láser sin contacto
Contenido impreso	Números, caracteres, códigos de barras 1D y 2D, códigos QR, patrones
Velocidad de impresión	La velocidad más rápida hasta 2,5 segundos/cassette (dependiendo del contenido de la impresión)
Tipo de cassettes	Sin tapa, con tapa puesta/despuesta
Ángulo de cassettes	Tanto 45° como 35°
Filtro	Sistema de purificación incorporado, con filtro de carbón y hepa.
Interfaz del sistema	LIS, HIS, PIS, PACS
Software del lado de la computadora	Windows 7, Windows 10, Linux
Pantalla	Pantalla táctil LED de 8 pulgadas
Alimentación	100 - 240 VAC, ± 10 %, 210 VA
Capacidad de carga	6 tolvas, hasta 600 cassettes
Organizador de salida	100 cassettes
Peso	420 * 380 * 395 mm
Peso neto	Aprox. 30 kg
Escaneo inteligente	✓
Reconocimiento inteligente de colores	✓

Importador oficial

**Sistemas
Analíticos**

📍 Av. Díaz Vélez 4562 (C1405DCN) - CABA
 ☎ +54 (11) 3497-2535
 ✉ ventas@sistemasanaliticos.com.ar